



maripoc Pharyn

Ryhmän A streptokokki
Adenovirus

mariPOC® pharyn -testi tunnistaa kaksi yleisintä nielutulehduksen aiheuttajaa yhdestä näytteestä.




Tulosten raportointi:

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 15 min | positiiviset |
| 55 min | heikot positiiviset negatiiviset |

Taudinaiheuttajaspesifinen diagnoosi mahdollistaa oikean hoidon!



Potilaan oireiden
tutkiminen

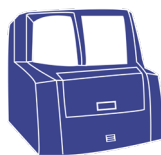

Automatisoitu
näyteanalyysi



Hoitopäätös



www.linkedin.fi/in/maripoc



www.twitter.com/ArcDialtd

ArcDia International Oy

www.maripoc.fi



Kotimainen





Suorituskyky

| mariPOC® pharyn verrattuna | Herkkyys | Spesifisyys | N |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----|
| Bakteeriviljely | | | |
| Ryhmän A streptokokki | 55 min: 150 % 15 min: 100 % | 100 % | 219 |
| Tikkupikatesti | | | |
| Adenovirus | 100 % | 100 % | 198 |

Vakkila J. ja muut (2015) J Clin Microbiol. 53:2079-2083

Ei tarvetta varmistusviljelyyn!

| | | Bakteeriviljely | |
|----------|--------------|-----------------|--------------|
| | | positiivinen | negatiivinen |
| mariPOC® | positiivinen | 38 | 17 |
| | negatiivinen | 1 | 137 |

Antikainen P. ja muut, 34. NSCMID 2017, Tórshavn, Färsaaret, Tanska. Abstrakti ja posterit #PP02.36.

Miksi valita Pharyn?

Taudinaiheuttajaspesifinen erottelu virus- ja bakteeri-peräisten infektioiden välillä on tärkeää antibioottien käytön optimoimiseksi.

Adenoviruksen tunnistaminen oireiden perusteella on hankalaa, sillä oireet muistuttavat bakteeritulehdusta ja myös adenovirus nostaa CRP-tasoa.

► **mariPOC® pharyn on jo 15 minuutissa yhtä herkkä kuin bakteeriviljely!**



www.linkedin.fi/in/maripoc

www.twitter.com/ArcDialtd

ArcDia International Oy

www.maripoc.fi



Kotimainen

